



دانشگاه علوم پزشکی اراک

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

عنوان دستورالعمل: معیارهای پذیرش و رد نمونه توسط آزمایشگاه بانک خون

1398/09/05

تاریخ اولین ابلاغ:

1404/02/27

تاریخ آخرین بازنگری

1405/02/27

تاریخ بازنگری بعدی:

IN/BT/01/02

کد سند:

عنوان:

معیارهای پذیرش و رد نمونه توسط آزمایشگاه بانک خون

دامنه:

بانک خون آزمایشگاه، واحدهای درمانی

تعاریف و اصطلاحات:

هدف:

پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش، ارتقای ایمنی بیماران در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن
فرد پاسخگو: روش ارزیابی:

مسئول فنی آزمایشگاه، سوپروایزر آزمایشگاه، مسئول و کارکنان بانک خون، ارزیابی از طریق مشاهده و مصاحبه
روش اجرا:

1- مسئول و کارکنان بانک خون آزمایشگاه، نمونه های تحویلی از واحدهای درمانی را از نظر معیارهای پذیرش کنترل کرده و در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل (معیارهای رد نمونه)، از پذیرش آن خودداری و یا آن را معدوم نموده و از واحد بستری بیمار درخواست نمونه مجدد نمایند:

ا. کم بودن نمونه

ب. نمونه بایستی حداقل 0/5 سی سی جهت تعیین گروه خونی و 2 سی سی جهت کراس مچ برای هر واحد خون درخواستی باشد.

II. نمونه خون همولیز

III. عدم درج مشخصات کامل بر روی برچسب لوله آزمایش

د. برچسب مشخصات بایستی شامل نام و نام خانوادگی بیمار، کد پذیرش، تاریخ، ساعت و دقیقه نمونه گیری، نام بخش و نام نمونه گیر باشد.

IV. مخدوش یا ناخوانا بودن برچسب نمونه

V. عدم تکمیل موارد درخواستی در فرم درخواست

VI. نمونه گرفته شده از دست سرم دار

ه. در زمان نمونه گیری چنانچه بیمار در حال دریافت مایعات تزریقی از يك دست می باشد، به منظور اجتناب از ترکیب نمونه با مایع تزریقی ترجیحا از دست دیگر بیمار استفاده نموده و یا در صورت لزوم از پائین تر از محل تزریق، نمونه را تهیه نمود. همچنین در صورت اجبار به تهیه نمونه از رگ یا محل تزریق مایعات وریدی، بایستی 5 تا 10 سی سی از خون دریافتی اولیه را دور ریخته و سپس نمونه جدید را جهت انجام آزمایش جمع آوری کرد.

VII. نمونه قدیمی

و. نمونه نبایستی بیش از سه روز قبل تهیه شده باشد مگر این که مشخص باشد بیمار حامله نبوده و یا در خلال 3 ماه قبل تزریق خون نداشته است. در صورتی که بیمار طی 10 روز گذشته تزریق خون داشته، نمونه نبایستی بیش از يك روز قبل تهیه شده باشد.



دانشگاه علوم پزشکی اراک
مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)
عنوان دستورالعمل: معیارهای پذیرش و رد نمونه توسط آزمایشگاه بانک
خون

تاریخ اولین ابلاغ: 1398/09/05
تاریخ آخرین بازنگری: 1404/02/27
تاریخ بازنگری بعدی: 1405/02/27
کد سند: IN/BT/01/02

2- کارکنان واحدهای درمانی بلافاصله نسبت به جایگزینی نمونه صحیح و ارسال مجدد به آزمایشگاه اقدام کنند.

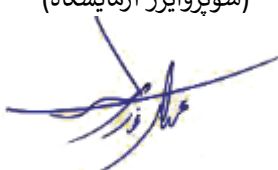
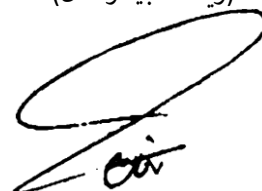
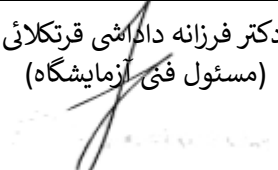
امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

برچسب نمونه آزمایش، فرم درخواست نمونه، HIS

منابع:

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران، ویرایش پنجم، 1401

راهنماهای ابلاغی سازمان انتقال خون

تهیه کننده/ تهیه کنندگان		
سمیه ربیعی (کارشناس مسئول بانک خون)	مهرداد نحوی (سوپروایزر آزمایشگاه) 	دکتر فرامرز دارابی (مسئول فنی بیوشیمی و مسئول آموزش آزمایشگاه)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر رضا شجاعی (ریاست بیمارستان) 	دکتر فرزانه داداشی قرتکلای (مسئول فنی آزمایشگاه) 	دکتر فرزانه داداشی قرتکلای (مسئول فنی آزمایشگاه) 